



Fønix



ILT-TANGA VEGLEIÐING

YVIRLIT

Vit hava opið gerandisdagar
frá kl 08.00 - 17.00

Tørvar tær bráðfeingishjálp
ring **112**

Tilhoys, so sum slangir og
iltbrillir, kunnu tit bíleggja frá
okkum, gerandisdagar á
telefon +298 31 19 09.

Ilt-útgerðin er ogn hjá Fønix,
og skal tískil latast aftur til
okkum eftir brúk.

Minst til at boða okkum frá 2-3
gerandisdagar áðrenn tangin
verður tómur - hetta svarar
vanliga til 2 ljós.



**Yvirlit yvir hvussu leingið tangin
heldur, tá hann er fullur.**

*Hetta er bert vegleiðandi fyri tann stóra tangen, um
tú ikki brúkar hann til at fylla tann berbara.*

DOSERING L/MIN.	BRÚKSTÍÐ (UMLEIÐ)
0,5	57 DAGAR
1,0	28 DAGAR
1,5	18 DAGAR
2,0	13 DAGAR
3,0	9 DAGAR
4,0	7 DAGAR
5,0	5 DAGAR
6,0	4 DAGAR

LÆR TÍN TANGA AT KENNA

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 Stussur til iltslangu | 4 Útloysari til tann berbara | 7 Tangi við flótandi ilt |
| 2 Stilla l/min | 5 Stussur til tann berbara | 8 Hjól |
| 3 Display til tanga | 6 Kondens-ílat | 9 Trýst mátari |



Dæmi, tá brúki er 1 l/min

DISPLAY (LJÓS)	BRÚKSTÍÐ (UMLEIÐ)
●	0-3 DAGAR
●	3 DAGAR
● ●	7 DAGAR
● ● ●	10 DAGAR
● ● ● ●	13 DAGAR
● ● ● ● ●	17 DAGAR
● ● ● ● ● ●	20 DAGAR
● ● ● ● ● ● ●	24 DAGAR
● ● ● ● ● ● ● ●	27 DAGAR

HVUSSU BRÚKAR EIN TANGAN OG HVAT ER HVAT

Fønix setur ilt-útgerðina upp og vegleiðir um brúk, tá komið verður á staðið fyrstu ferð. Tó er umráðandi at lesa hesa mannagongd, so tann ið nýtir iltina ella tann ið tekur sær av tí, er kunnaður um hvussu mannagongdin er.



1 Display

Trýst á tann bláa knøttin. Tær grønu perunar siga tær hvussu nógv er eftir í tanganum. Lýsir tann gula, er um at vera tómt.



5 Aftaná brúk

Skrúva fyri tá tú tekur iltbrilluna av. Hettar er umráðandi fyri brunatrygd og fyri skynsama nýtslu.



2 Kanna kondens-ílatið

kondens-ílatið samlar vatn og skal tømast javnan, so tað ikki flýtir yvir. Størri nýtslan er, meira kemur í. **(Vaska av og á)**



3 Iltslanga

Set iltslanguna á stussin. Og her er tað sera umráðandi, at tað er ein einkult slanga og ikki dupult.



4 Stilla iltina inn til tín tørv

Stilla iltina inn til tín tørv, hetta hevur læknin kunna teg um, tá tú fært tanga.




HELIOS PLUS OG MARATHON - Bert til dagligt brúk, og er IKKI til at sova við.

Nú er umráðandi at seta seg inn í, hvussu tann berbari riggar. Her hava vit gjørt eitt yvirlit, sum greiðir frá hvat alt á tí berbara tanganum er og á síðu 6 og 7 lærir tú hann enn betur at kenna, og sært hvussu tú fyllir hann.

Fønix vegleiðir teg at fylla tann berbara og at brúka hann, fyrstu ferð tú fært hann – les kortini hesa mannagongd, so tú og tíni næstu vita, hvussu tann berbari verður fylltur og brúktur.

Kenn tín berbara ilt-tanga

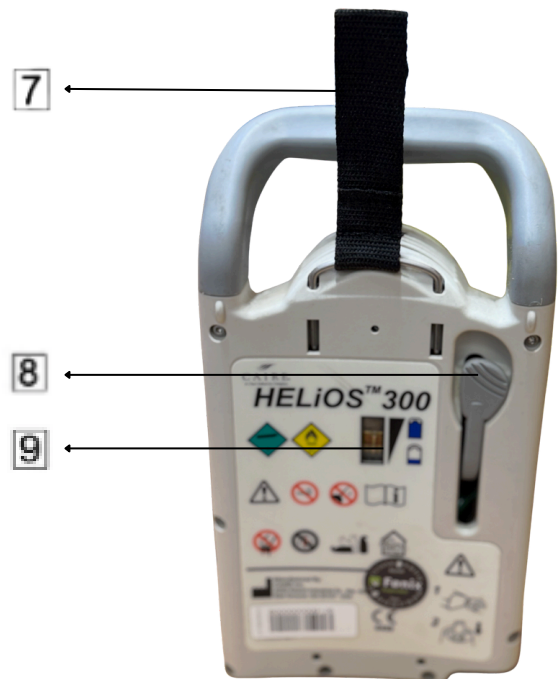

- 1 Hondtak
- 2 Verður ikki brúkt
- 3 Stussur til fylling av flótandi ilt frá stóra tanganum
- 4 Stilla l/min
- 5 Her setur man dupult iltbrillurnar uppá (Mugu og skulu vera dupultar).
- 6 Her setur man dupult iltbrillurnar uppá (Mugu og skulu vera dupultar).
- 7 Stroppur/vekt til at máta hvussu nógv er í tí berbara ilttanganum
- 8 Hettar er til at trýsta niður, tá tangin verður fylltur (sí síðu 8)
- 9 Her sæst ein grøn strika, sum vísur mongina av ilt í tanganum (ein mátari, og hettar er tí tú togar í stroppin, punkt 7)

BRÚKSTÍÐ OG NÝTSLA

Umleið brúkstíð, tá tann berbari er 100% fyltur

Helios Plus

FLOW	TÍMAR
C0,12	22
C0,25	18
C0,50	12
C0,75	8
D1,0	18
D1,5	12
D2,0	9
D2,5	7
D3,0	6
D3,5	5
D4,0	4



Helios Marathon


FLOW	TÍMAR
C1	12
C2	6
C3	4
C4	3
C5	2
C6	2
D 1,5	29
D 2,0	22
D 2,5	18
D 3,0	15
D 4,0	11



Umráðandi at kann, áðrenn brúk.



Iltslangan má sita rætt.
Set iltslanguna á stussarnar.
Her er umráðandi at tað er ein dupult iltbrilla og ikki ein einkult, sum bert er til tann stóra tanga!

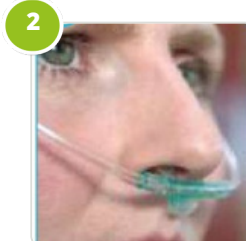

Kanna iltina.

Tú kannar um ilt kemur úr slanguni, við at seta ein finger fyri ella tildømis koyra holið upp ímóti eygunum, so fólir man lættliga um nakað kemur út.

(Eisini kann vera neyðugt, at anda gjøgnum slanguna, fyri at fáa gongd á.)

Sera týdningarmikið

Hav altíð tann berbara ilttanga í einari av hesum støðum: standandi ella flatur á baksíðuni.



Mannagongd til, tá Helios Plus og Marathon skulu fyllast: Tað tekur umleið 5 - 10 min.



Um tann berbari er frystir fastur - brúka tá útloysarin (**punkt 4, síðu 3**) fyri at fáa hann leysan.

Um knarvin (**punkt 8, síða 5**) ikki kann latast aftur eftir fylling, er orsøkin sum oftast at ísur er frystir fastur tætt við knarvan. **Tað kann taka upp til ein tíma, áðrenn tann berbari kann brúkast aftur.**

TRYGDAR ÁVÍSING



- Royking er bannað nærhendis iltútgerðini.

- Nýt aldrin olju, feitt ella annað líknandi til iltútgerðina - Ilt kann skapa eina kemiska reaktión við feittstoffum.

- Útgerðin má ikki flytast av staðnum/heiminum uttan eftur avtalu við Fønix. Tangin má ikki leggjast niður.

- Nýt aldrin meira ilt, enn læknin hevur ordinera. Iltnýtslan má bert økjast í samráð við lækna.

- Latið vera við brúka amboð uppá tangan. Ábøtur og umvælingar verða gjørdar av okkara serútbúnu handverkarum.

- Ivast tit í nøkrum, vinarliga ring til okkara á telefon +298 31 19 09.



Fønix - TÍN ILT VEITARI



VIRÐISGRUNÐARLAG

Fønix skal vera kent fyri:

- at vera ein álítandi samstarvsfelagi
- at dygd, trygd og trivnaður eru í háðsæti
- at øll søla og øll arbeiði verða væl úr hondum greidd til kappingarførar prísir
- at vera eitt lokkandi arbeiðspláss við skipaðum viðurskiftum á øllum økjum

MÁLSETNINGUR

Vit vilja støðugt arbeiða fyri:

- at fasthalda støðuna, sum ein av fremstu fyrirkum á føroyska marknaðinum
- at skapa nøktandi fíggarlig úrslit
- at varveita eitt fakligt og sosialt umhvørvi, soleiðis at røttu fakfólkini trívast í felagnum
- at vaksa um virksemd, við at troyta aðrar marknaðir, um hetta kann gerast við einum nøktandi fíggarligum úrsliti, í mun til váðan

SAMBAND



Fønix

Mykinesgøta 8

FO-100 Tórshavn

Telefon: +298 311909

Teldupostur: fonix@fonix.fo

Heimasíða: www.fonix.fo

